

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti

STERYLAB S.r.l.

VIA MAGENTA 77/6 • 20017 RHO (MILANO) • ITALY

Ph. +39-02 93508427 - Fax +39-02 93508426

info@sterylal.it • www.sterylal.it

sterylal




STRUMENTO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA SU TESSUTI MOLLI
SEMI-AUTOMATIC SOFT TISSUE BIOPSY NEEDLE

SPRING-CUT®

- Mandrino sfilabile
Retractable stylet
- Blocco di sicurezza
Safety Lock
- Codice colore
Colour coded
- Escursione biptica 10 -20 mm
Biopic throw 10 -20 mm
- Cannula Rimovibile
Detachable Cannula

- Cannula centimetrata
Centimetre marks

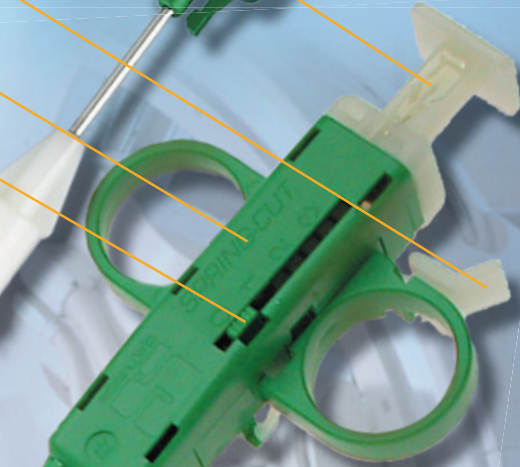

ECHONOX®

È l'acciaio ecoriflettente che rende l'ago perfettamente visibile sul monitor per tutta la sua lunghezza.

The echoreflecting steel which makes the whole length of the needle clearly visible on the monitor.



SPRING-CUT® SET-TAC



Set con ago-guida per procedure coassiali sotto T.A.C.
Set with introducer needle for co-axial procedure under CT scanning

STRUMENTO SEMI-AUTOMATICO PER BIOPSIA SU TESSUTI MOLLI

SEMIAUTOMATIC SOFT TISSUE BIOPSY NEEDLE

 **SPRING-CUT®** rappresenta l'ultima generazione di aghi per biopsia a ghigliottina a funzionamento semi-automatico.

▶ Le sue caratteristiche esclusive lo differenziano da tutti gli altri strumenti per biopsia della medesima categoria:

▶ **Pulsante del mandrino solidale con l'impugnatura durante la penetrazione:** manovra più semplice, maggiore sicurezza nella procedura biptica, maggiore sensibilità durante la penetrazione.

▶ **Escursione biptica predeterminabile (10-20 mm):** adeguamento dimensionale alla lesione.

▶ **Mandrino e cannula rimovibili:** controllo dell'adeguatezza del campione biptico, possibilità di prelievo multiplo (es.: mappazione della prostata).

▶ Codice colore per una facile identificazione del calibro dell'ago.

▶ Monouso, sterile: riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali.


▶ **SPRING-CUT®** è disponibile anche nelle seguenti varianti:

▶ **SPRING-CUT® PLUS⁺:**
Ago in ECHONOX®.

▶ **SPRING-CUT® DC :**
con la cannula biptica staccabile per prelievi multipli a singolo accesso.

▶ **SPRING-CUT® SET-TAC:**
SPRING-CUT® + Ago-Guida mininvasivo per procedure coassiali sottoTAC (Ago-Guida con stesso calibro = procedura meno invasiva).

▶ Disponibile ago introduttore dedicato, per procedure coassiali multiple (cod. serie **AGS**).

 **SPRING-CUT®** represents the latest generation of semi automatic guillotine-type biopsy needles. Its exclusive design features make **SPRING-CUT®** unique.

▶ **SPRING-CUT®** can be easily operated with one hand making it ideal for procedures requiring ultrasound guidance.

▶ **Stylet advance button remains locked during penetration:** simpler manoeuvre, increased safety during the biopsy procedure, enhanced sensibility upon penetration.

▶ **Pre-determined biptic depth (10-20mm):** adapting to the lesion size.

▶ **Canula and stylet completely removable:** control of specimen size and possibility of multiple biopsies (prostate mapping).

▶ Colour coded for easier needle size (gauge) determination.

▶ Sterile, single-use: reduction of infection hazard.

▶ **SPRING-CUT®** is also available in the following releases:

▶ **SPRING-CUT® PLUS⁺:**
Needle made from ECHONOX®.

▶ **SPRING-CUT® DC:**
with detachable cannula for single-access multiple procedures.

▶ **SPRING-CUT® SET-TAC:**
specific set with less invasive introducer needle for co-axial procedure under CT scanning.

▶ Specific introducer needle for multiple co-axial procedures is available (ref. series **AGS**).

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES

SPRING-CUT®

OPZIONI DISPONIBILI

OPTIONAL RELEASES

TIPO TYPE	CALIBRO GAUGE	LUNGH. LENGTH	PLUS ⁺ 	CODICE ORDERING	CONF. PCKG.
SPRING-CUT®	14-16-18-20	11-15-20-25-(47)	SI/YES	SPG XXYY (*)	20
SPRING-CUT® DC	14-16-18-20	15-20-25	SI/YES	SPG XXYY DC	20
SPRING-CUT® SET-TAC	14-16-18-20	11-15-20	NO	SPG XXYY TC	10

(*): **XX= Gauge / YY= Lungh./Length.**

Come comporre il codice d'ordine / ordering: **SPRING-CUT® 18 Gauge -20 cm = SPG1820**

Versione PLUS⁺ : aggiungere rispettivamente "+" al codice d'ordine.
Release PLUS⁺ : add "+" to the cat. nr. of standard release.

Emiss.: D.C. - Rev.: 03/2017



0 4 2 6

RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE:

STERYLAB S.r.l. • VIA MAGENTA 77/6 • 20017 RHO (MILANO) • ITALY
Ph. +39 - 02 93508427 - Fax +39 - 02 93508426 • info@sterylalab.it • www.sterylalab.it

sterylalab

